

Master-Core

Développé par le Prof. Istvan Urban

Le système Bone Management® Master-Core permet le prélèvement simple et sûr de cylindres osseux dans le cadre d'une augmentation. Pour ce faire, ce système contient différents trépan de longueurs et diamètres spécifiques. À l'aide de ceux-ci, le prélèvement de cylindres osseux de diamètres 3.0 mm, 5.00 mm et 7.0 mm et de longueurs de 3.00 mm à 8.00 mm est désormais possible.

Grâce aux différentes longueurs de trépan, vous bénéficiez d'une butée "automatique", assurant la protection des structures anatomiques et permettant ainsi un prélèvement sûr et contrôlé d'os. De plus, le marquage de profondeur sur les parties travaillantes permet un contrôle supplémentaire de profondeur lors du prélèvement. Le revêtement noir des trépan permet enfin d'éviter tout reflet et éblouissement et donc une visibilité optimale du marquage de profondeur.



BMC00
Master-Core






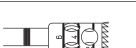






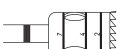
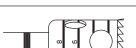

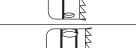
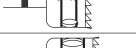



En résumé

- Prélèvement simple et sûr de cylindres osseux
- Protection optimale des structures anatomiques grâce aux trépan de profondeurs déterminées
- Marquage de profondeur sur chaque trépan pour un contrôle supplémentaire de profondeur
- Prélèvement de cylindres osseux de différents diamètres et de différentes longueurs
- Revêtement noir sur les trépan pour un travail sans reflet ou éblouissement

Pour commander, appelez nous au
04.26.78.74.83 ou envoyez un mail
à commande@myplant-dental.com.

Meisinger
since
1888

Master-Core

	Référence	Tige	Taille	Ø Diamètre Interne-/Externe-Longueur [mm]	Vitesse max. reco.	Pièces / Kit	Quantité 
	BMC00	-	-	-	-	1	
	DV229	204	030	Ø 3,0 / 4,0, -	300 - 500 800	1	
	DV229	204	050	Ø 5,0 / 6,0, -	300 - 500 800	1	
	DV229	204	070	Ø 7,0 / 8,0, -	300 - 500 800	1	
	229IU	206	406	Ø 3,0 / 4,0, L6	300 - 500 800	1	
	229IU	206	407	Ø 3,0 / 4,0, L7	300 - 500 800	1	
	229IU	206	408	Ø 3,0 / 4,0, L8	300 - 500 800	1	
	229IU	206	604	Ø 5,0 / 6,0, L4	300 - 500 800	1	
	229IU	206	605	Ø 5,0 / 6,0, L5	300 - 500 800	1	
	229IU	206	606	Ø 5,0 / 6,0, L6	300 - 500 800	1	
	229IU	206	607	Ø 5,0 / 6,0, L7	300 - 500 800	1	
	229IU	206	608	Ø 5,0 / 6,0, L8	300 - 500 800	1	
	229IU	206	803	Ø 7,0 / 8,0, L3	300 - 500 800	1	
	229IU	206	804	Ø 7,0 / 8,0, L4	300 - 500 800	1	
	229IU	206	805	Ø 7,0 / 8,0, L5	300 - 500 800	1	
	229IU	206	806	Ø 7,0 / 8,0, L6	300 - 500 800	1	
	229IU	206	807	Ø 7,0 / 8,0, L7	300 - 500 800	1	
	229IU	206	808	Ø 7,0 / 8,0, L8	300 - 500 800	1	
	BV025	205	-	Ø - / -, L25	- 15.000	1	

CE 0044

Pour les professionnels des soins dentaires.

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

myplant France

Mamaworks, 92 cours Lafayette, CS 53515 69489 Lyon Cedex 3
Tél.: 04 26 78 74 83
commande@myplant-dental.com www.myplant-dental.com

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne
Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
info@meisinger.de • www.meisinger.de

85FL 135FR - 0120

