

Crest-Control

Systeme d'augmentation horizontale Spreading

Crest-Control est un système d'augmentation osseuse horizontale qui permet un spreading de crête alvéolaire résorbée, de façon prédéterminée et très peu invasive, en particulier sur la mâchoire inférieure. Grâce aux écarteurs horizontaux disposant d'une mécanique éprouvée, la crête alvéolaire peut être augmentée jusqu'à un maximum de 5mm, permettant la pose de tous types d'implant au sein de la partie augmentée.



© Dr. Raymond Kimsey, D.D.S

Résumé

- Système de préparation du site pour la mise en place d'un implant
- Contrôle de l'extension de l'os résorbé
- Pas de transfert autologue nécessaire, mise en place de plusieurs implants possible



Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888


Crest-Control

	Pointeur	Scies à revêtement diamanté.		Instruments d'ostéotomie		Adaptateur pour les écarteurs horizontaux	Clé à cliquet	Écarteurs horizontaux (Ø pres)	
Ref.	186RF	231DC*	231DC*	HM331L	HM254E	SW0K1	CARA4	Ref.	VCD50
Tige ¹	204	204	204	205	205	-	-	Profondeur mm	6.0
Taille ²	018	100	130	010	012	-	-	Longueur mm	9.75
Longueur mm	12.0	0.3	0.3	5.5	6.0	22.0	84.0	Hauteur mm	10.6
	-	-	-	-	-	-	-	Écartement maximum mm	Max. 5.0
	1.8	10.0	13.0	1.0	1.2	-	-		

¹ 204=RA, 205=RA L ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm



 Diamètre minimum

 Diamètre externe

 Avec la réutilisation des produits jetables, un risque d'infection ne peut être exclu et une sûreté fonctionnelle sans risque ne peut être garantie.

En option




Ref.	SW0L1
Tige ¹	-
Taille ²	-
Longueur mm	27.0
	-
	-

 Diamètre minimum

 Diamètre externe

Écarteurs horizontaux

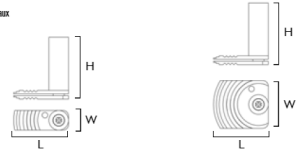

Ref.	VCD35	VCD85
Width mm	3.5	8.5
Length mm	9.75	9.75
Height mm	10.6	10.6
Lifting	Max.	Max.
Height mm	5.0	5.0

Recommandation

- Niveau osseux minimum : largeur de la crête alvéolaire de 2 mm et hauteur 10 mm
- Mise en oeuvre de directement après extraction
- Nécessité de présence d'os spongieux jusqu'en haut de la crête

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de