

Kit Péri-implantite

Fraises de finition au carbure de tungstène pour traitement des péri-implantites

Le Kit Péri-implantite contient huit fraises au carbure de tungstène, en forme d'oeuf/ballon de rugby et de flamme, parfaitement coordonnées pour un traitement idéal des cas de péri-implantites.

Les deux formes de fraises proposées sont disponibles en deux tailles, et chacune en granulométrie standard et ultra-fine. Les formes, tailles et granulométrie des parties travaillantes conviennent parfaitement aux traitements intra-oraux du titane et pour différents types d'implants (différents cols et épaulements). Toutes ces fraises disposent d'une tige particulièrement longue (longueur totale 32mm), qui permet en particulier le traitement des zones profondes difficiles d'accès. Pour le traitement des péri-implantites, ces fraises sont utilisées dans le sens des aiguilles d'une montre (horaire) et sont donc guidées, autour de l'implant exposé, par son filetage, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (anti-horaire), de façon à lisser la surface de l'implant.



2575
Kit Péri-implantite

Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr


Meisinger
since
1888


Kit Péri-implantite

En résumé


- Kit de fraises carbure de tungstène sur tige turbine longue
- 4 formes / 2 tailles par forme
- Idéal pour le traitement des péri-implantite

Fraises de finition au carbure de tungstène

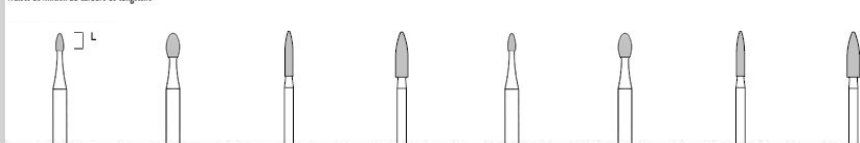

Ref.	HM379	HM379	HM48L	HM48L	HM379U	HM379U	HM48LU	HM48LU
Tige ¹	317	317	317	317	317	317	317	317
Size ²	014	023	014	023	014	023	014	023
Longueur mm	3.1	4.2	8.0	8.0	3.1	4.2	8.0	8.0
 Diamètre	1.4	2.3	1.4	2.3	1.4	2.3	1.4	2.3

¹ 317=FG-XXL ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

 Diamètre externe

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de