


Trephine Ejection Kit


Système de trépan pour extraction de greffons osseux cylindriques

Le Trephine Ejection Kit combine plusieurs techniques. Ces trépan permettent une extraction sûre de cylindres osseux. Le refroidissement interne protège l'os d'un risque de surchauffe. La partie travaillante du trépan est détachable et permet une extraction particulièrement aisée du cylindre osseux découpé. Grâce à un instrument d'éjection spécifique parfaitement ajusté au diamètre du trépan, le cylindre osseux peut être éjecté facilement. De plus, le kit contient des forets-trépan «pointeurs» pour plus de précision.

Le Trephine Ejection Kit permet une chirurgie sûre, d'une grande flexibilité.

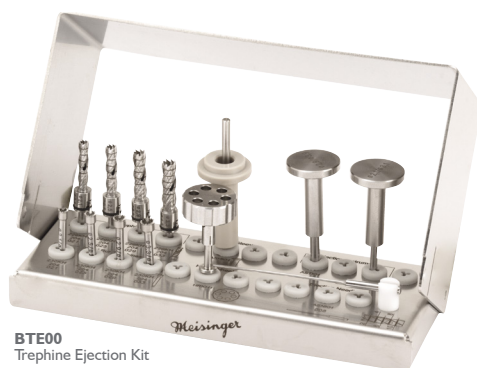

BTE00
Trephine Ejection Kit

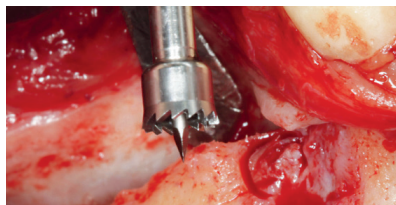

© Prof. Dr. Fouad Khoury



© Prof. Dr. Fouad Khoury


Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr


Meisinger since 1888

Trephine Ejection Kit

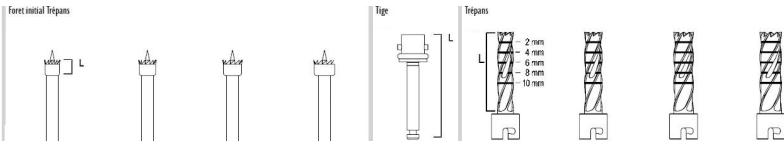

Ref.	230KH	230KH	230KH	230KH	229KH*	229KH	229KH	229KH	229KH
Tige ¹	204	204	204	204	204	900	900	900	900
Taille ²	021	025	029	033	000	021	025	029	033
Longueur mm	2.0	2.0	2.0	2.0	20.5	15.5	15.5	15.5	15.5
□	2.1	2.5	2.9	3.3	-	2.1	2.5	2.9	3.3
□*	3.1	3.5	3.9	4.3	-	3.1	3.5	3.9	4.3

¹ 204=RA ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm □ Diamètre interne □* Diamètre externe

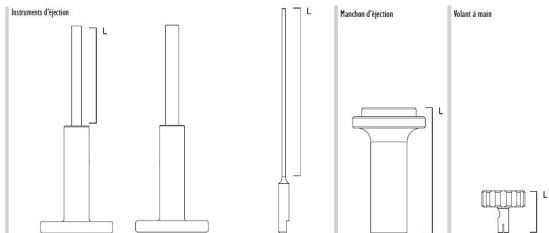

Ref.	ASTKH	ASTKH	ASNKH	ASHKH	HRKH1
Tige ¹	-	-	-	-	-
Taille ²	021	029	008	-	-
Longueur mm	22.0	22.0	37.0	28.0	15.5
□	-	-	-	5.5	-
□*	5.5	5.5	-	-	-
△	2.1	2.9	0.8	-	-

¹ 204=RA ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm △ Diamètre minimum □ Diamètre interne □* Diamètre externe

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de